



Vejledning til kortlægningskemaet

Kortlægningskemaet er et værktøj, som hurtigt og enkelt giver overblik og viser, om den korrekte ble er valgt.

Vådindikator med graduerings-skala er selve redskabet.

- 1 Vådindikatoren er de 2 længdegående gule streger bag på bleen. De skifter farve til blå/grøn, i takt med at bleen suger.
- 2 Gradueringskalaen er de felter, der omkranser og inddeler vådindikatoren. Antal felter, som skifter farve, skal registreres i kortlægningskemaet.


ABENA Kortlægningskema

Navn: _____

Hvilke bleer og evt. tilbehør/bruser bruges der under kortlægningen? _____

Dag og eftermiddag: _____ Nat: _____ Helsegenetiske test: _____

Dag	Eftermiddag	Natt	Eftermiddag		Natt		Vandindikator / gradueringsfelt	Hvordan ble fungerer	Indikator
			Ja	Nej	Ja	Nej			
1. dag	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL
	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL
	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL
	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL
	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL
2. dag	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL
	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL
	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL
	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL
	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL
3. dag	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL
	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL
	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL
	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL
	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL	KL

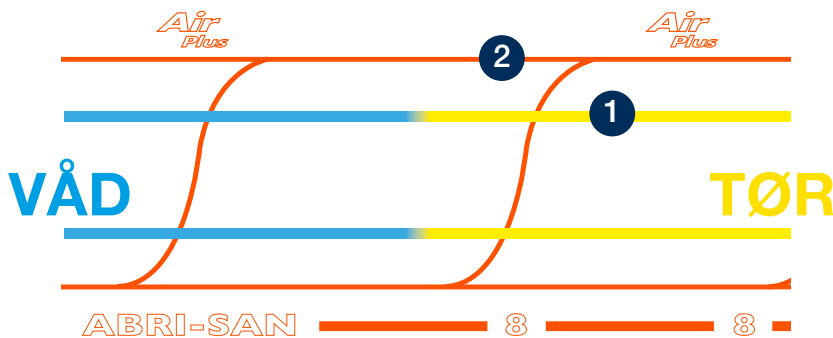

Vådindikator

VÅD TØR

ABRI-SAN

Hvordan kan man aflæse, hvor mange felter de enkelte bleer har. Dette bruges, når man anvender vådindikatoren som hjælp/redskab til at analysere bleens udnyttelsesgrad. Et ble har 3 felter, der har skiftet farve på en ble, som har 11 felter, viser altså, at bleen har for eksempel forbrudt 33 procent. Generelt er bleen fuldt udnyttet, når 75% af felterne har skiftet farve.

Gradueringsfelter

Jævn ble	Duksble	Tapetele	Diathese
Abri-San	Abri-Flex	Abri-Form	Abri-Wing
0: total 0 felter	Juniør XS2 total 4 felter	XS: total 5 felter	S: total 7 felter
1: total 1 felter	XS: ingen	M: total 6 felter	M: total 8 felter
2: total 2 felter	S: total 7 felter	L: total 8 felter	L: total 9 felter
3: total 3 felter	M: total 8 felter	XL: total 11 felter	XL: total 10 felter
4: total 4 felter	XL: total 9 felter		
5: total 5 felter			
Special: ingen			
Abri-Man			
Special: total 3 felter			

www.abena.dk

Formålet med kortlægning er at finde ud af, om borgeren har den bedst mulige bløsning.

Det tager ganske kort tid for plejepersonalet at udfylde skemaet.

Skemaet udfyldes af alle vagter i dagvagt, aftenvagt og nattevagt. I alt i 3 døgn.

Det er vigtigt, at alle gør som vanligt, mens skemaet føres. På den måde får man et optimalt billede af borgerens inkontinenssituation.

Når skemaet udfyldes, skal man kun forholde sig til én linje ad gangen. Næste kollega udfylder én linje osv. Det tager ganske kort tid.

Hvert døgn er markeret med en farve:



ABENA
Kortlægningsskema

Navn: _____

Hvilke bier og evt. fisesingsbruser bruges der under kortlægningen:
 Dag og aften brugt: _____ Nat brugt: _____ Fisesingsbruser, som evt. anvendes: _____

Døgn	Alle tages af kl.	Antal toilet der har skiftet farve:	Vilkt se eller sørges for:		Er der afløst i toilet:		Hjælps bøger på toilet:	Vandledning / aft. i forbindelse med toiletbrug:	Hullens til sættes på:	Inkluder
			Ja	Nej	Ja	Nej				
1. døgn Dato: _____	Kl.	6 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L1
	Kl.	3 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L3
	Kl.	4 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L1
	Kl.	3 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L3
	Kl.	6 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L1
	Kl.	3 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L3
2. døgn Dato: _____	Kl.	6 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L1
	Kl.	3 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L3
	Kl.	4 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L1
	Kl.	3 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L3
	Kl.	6 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L1
	Kl.	3 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L3
3. døgn Dato: _____	Kl.	6 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L1
	Kl.	3 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L3
	Kl.	4 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L1
	Kl.	3 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L3
	Kl.	6 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L1
	Kl.	3 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L3

VENO

Sådan udfyldes skemaet

Ved hvert bleskift udfyldes én linje som vist her i eksemplet

ABENA
Kortlægningsskema

Navn: **Hans Hansen**

Hvilke bier og evt. fisesingsbruser bruges der under kortlægningen:
 Dag og aften brugt: _____ Nat brugt: _____ Fisesingsbruser, som evt. anvendes: _____

Døgn	Alle tages af kl.	Antal toilet der har skiftet farve:	Vilkt se eller sørges for:		Er der afløst i toilet:		Hjælps bøger på toilet:	Vandledning / aft. i forbindelse med toiletbrug:	Hullens til sættes på:	Inkluder
			Ja	Nej	Ja	Nej				
1. døgn	kl. 7.45	6 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L1

Eksemplet på hvordan 1 døgn kunne se ud, når alle vagter har udfyldt skemaet

ABENA
Kortlægningsskema

Navn: **Hans Hansen**

Hvilke bier og evt. fisesingsbruser bruges der under kortlægningen:
 Dag og aften brugt: _____ Nat brugt: _____ Fisesingsbruser, som evt. anvendes: _____

Døgn	Alle tages af kl.	Antal toilet der har skiftet farve:	Vilkt se eller sørges for:		Er der afløst i toilet:		Hjælps bøger på toilet:	Vandledning / aft. i forbindelse med toiletbrug:	Hullens til sættes på:	Inkluder
			Ja	Nej	Ja	Nej				
1. døgn	kl. 7.45	6 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L1
	kl. 11.50	3 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L3
	kl. 15.45	4 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L1
	kl. 19.00	6 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L3
	kl. 21.50	6 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L1
	kl. 4.45	3 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L3

Eksemplet her viser, hvordan et skema kan se ud, når alle 3 døgn er udfyldt

ABENA
Kortlægningsskema

Navn: **Hans Hansen**

Hvilke bier og evt. fisesingsbruser bruges der under kortlægningen:
 Dag og aften brugt: _____ Nat brugt: _____ Fisesingsbruser, som evt. anvendes: _____

Døgn	Alle tages af kl.	Antal toilet der har skiftet farve:	Vilkt se eller sørges for:		Er der afløst i toilet:		Hjælps bøger på toilet:	Vandledning / aft. i forbindelse med toiletbrug:	Hullens til sættes på:	Inkluder
			Ja	Nej	Ja	Nej				
1. døgn	kl. 7.45	6 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L1
	kl. 11.50	3 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L3
	kl. 15.45	4 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L1
	kl. 19.00	6 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L3
	kl. 21.50	6 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L1
	kl. 4.45	3 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L3
2. døgn	kl. 8.00	6 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L1
	kl. 11.45	3 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L3
	kl. 15.45	2 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L1
	kl. 19.15	5 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L3
	kl. 21.45	4 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L1
	kl.	3 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L3
3. døgn	kl. 7.35	5 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L1
	kl. 11.45	5 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L3
	kl. 15.45	6 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L1
	kl. 19.15	3 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L3
	kl. 20.30	6 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L1
	kl.	3 toilet	X	X	X	X				Abri-Form L3

VENO

Hvordan aflæses det udfyldte kortlægningsskema

På bagsiden af kortlægningsskemaet finder man oplysning om, hvor mange felter de forskellige produkter har total.

Det totale antal felter er vigtigt til analysen, når man skal vurdere, om produktets maksimale sugekapacitet passer med det antal felter, som er brugt ved hvert bleskift.

Bleens gradueringsfelter



Åben ble Abri-San	Bukseble Abri-Flex	Tapeble Abri-Form	Bælteble Abri-Wing
5: total 8 felter	Junior XS2: total 4 felter	XS: total 6 felter	S: total 7 felter
6: total 8 felter	XS: ingen	S: total 8 felter	M: total 8 felter
7: total 8 felter	S: total 7 felter	M: total 9 felter	L: total 9 felter
8: total 8 felter	M: total 7 felter	L: total 11 felter	XL: total 10 felter
9: total 9 felter	L: total 8 felter	XL: total 11 felter	
10: total 9 felter	XL: total 8 felter		
11: total 9 felter			
Special: ingen			
Abri-Man			
Special: total 9 felter			

ABENA
Kortlægningsskema

Navn: **Hans Hansen**

Hvilke bleer og evt. Bleeringsstrusser bruges der under kortlægningen:

Dag og nat (12 timer): **Abri-Form L1** Nat (12 timer): **Abri-Form L3** Fliseringsstrusse, søv-evt. anvendes:

Dag og nat (12 timer)	Antal felter der har skiftet farve:	Værdi		Er der afbøring i bleen	Hjælper tungen på toilet	Værdi	Værdi	Hjælper bleen lægges på	Inkluder
		Ja	Nej						
1. dags kl. 7.45	6 felter	X		X					Abri-Form L1
Dato: kl. 11.50	3 felter	X		X					Abri-Form L1
kl. 15.45	4 felter	X		X					Abri-Form L1
kl. 20.00	6 felter	X		X					Abri-Form L3
kl. 2.50	6 felter	X		X					Abri-Form L3
kl. 4.45	3 felter	X		X					Abri-Form L3
kl. 7.45	3 felter	X		X					Abri-Form L3
2. dags kl. 8.00	6 felter	X		X					Abri-Form L1
Dato: kl. 13.35	3 felter	X		X					Abri-Form L1
kl. 17.45	3 felter	X		X					Abri-Form L1
kl. 19.45	2 felter	X		X					Abri-Form L1
kl. 1.05	5 felter	X		X					Abri-Form L3
kl. 2.45	4 felter	X		X					Abri-Form L3
kl. 7.35	5 felter	X		X					Abri-Form L1
Dato: kl. 12.45	5 felter	X		X					Abri-Form L3
kl. 15.45	6 felter	X		X					Abri-Form L1
kl. 19.15	3 felter	X		X					Abri-Form L3
kl. 00.30	6 felter	X		X					Abri-Form L3
kl. 7.35	5 felter	X		X					Abri-Form L1
Dato: kl. 12.45	5 felter	X		X					Abri-Form L3
kl. 15.45	6 felter	X		X					Abri-Form L1
kl. 19.15	3 felter	X		X					Abri-Form L3
kl. 00.30	6 felter	X		X					Abri-Form L3

tages af kl.	Antal felter der har skiftet farve:	Værdi
7.45	6 felter	
1.50	3 felter	X
5.45	4 felter	
0.00	6 felter	
2.50	6 felter	
7.45	3 felter	
8.00	6 felter	
13.35	3 felter	X
3.15	3 felter	
7.45	3 felter	
9.45	2 felter	
1.05	5 felter	
2.45	4 felter	
7.35	5 felter	X
2.45	5 felter	
5.45	6 felter	
9.15	3 felter	
0.30	6 felter	
	felter	

Produktet har 11 felter total. Kortlægningsskemaet viser, at max 6 felter har skiftet farve, ved de enkelte bleskift. Det viser os, at produktet let kunne være mindre.



Hvad kan man se og læse ud af det udfyldte kortlægningssskema

ABENA
Kortlægningssskema

Navn: **Hans Hansen**

Hvilke bleer og evt. fikseringstrusser bruges der under kortlægningen:

Dag og aften bruges: **Abri-Form L1** **2** **3** **4** **5** Net bruges: **Abri-Form L3** Fikseringstrusse, som evt. anvendes:

1. dag	Ble tages af kl.	Antal felter der har skiftet farve:	Vådt tøj eller sengetøj		Er der afføring i bleen		Hjælpes borger på toilet		Vandladning / aff. i forbindelse med toiletbesøg		Hvilken ble lægges på	Initialer
			Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja / Uurin / A/aaf.	Nej		
1. dag	Kl. 7.45	6 felter		X		X		X			Abri-Form L1	XX
	Kl. 11.50	3 felter	X			X		X			Abri-Form L1	XX
	Kl. 15.45	4 felter		X		X		X			Abri-Form L1	XX
	Kl. 20.00	6 felter		X		X		X			Abri-Form L3	XX
	Kl. 2.50	6 felter		X		X		X			Abri-Form L3	XX
	Kl. 4.45	3 felter		X		X		X			Abri-Form L3	XX
	Kl.	felter										
2. dag	Kl. 8.00	6 felter	X			X		X		U+A	Abri-Form L1	XX
	Kl. 13.15	3 felter		X		X		X		X	Abri-Form L1	XX
	Kl. 17.45	3 felter		X		X		X			Abri-Form L1	XX
	Kl. 19.45	2 felter		X		X		X			Abri-Form L3	XX
	Kl. 1.05	5 felter		X		X		X			Abri-Form L3	XX
	Kl. 2.45	4 felter		X		X		X			Abri-Form L3	XX
	Kl.	felter										
3. dag	Kl. 7.35	5 felter	X			X		X			Abri-Form L1	XX
	Kl. 12.45	5 felter		X		X		X			Abri-Form L1	XX
	Kl. 15.45	6 felter		X		X		X			Abri-Form L1	XX
	Kl. 19.15	3 felter		X		X		X		U	Abri-Form L3	XX
	Kl. 00.30	6 felter		X		X		X			Abri-Form L3	XX
	Kl.	felter										

VEND

- 1** Hvor ofte og hvornår skiftes bleen?
- Er det passende?
- 2** Hvor udnyttet er bleen?
- Er det optimalt?
- 3** Er der lækager?
- Hvilken løsning kan der evt. være på det?
- 4** Er der afføring i bleen eller i forbindelse med toiletbesøg?
- Noget der bør ændres?
- 5** Hvor ofte hjælpes borgeren på toilet?
- Er det passende?

Tag altid stilling til en eventuel ændring i valg af produkt ud fra borgerens helhedssituation

