



# Sår er kun et symptom - årsagen skal findes


## Oprensningsfasen

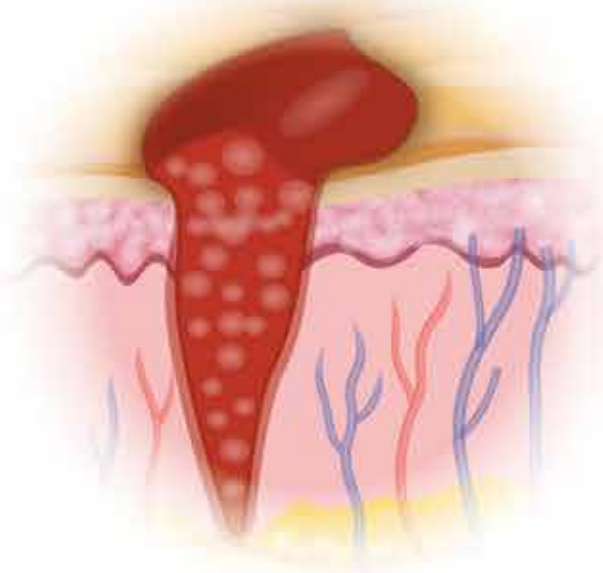

## Nydannelsesfasen

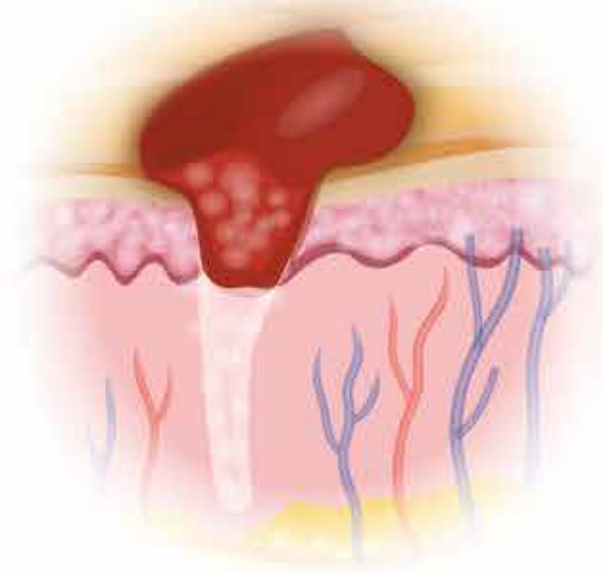

## Modningsfasen

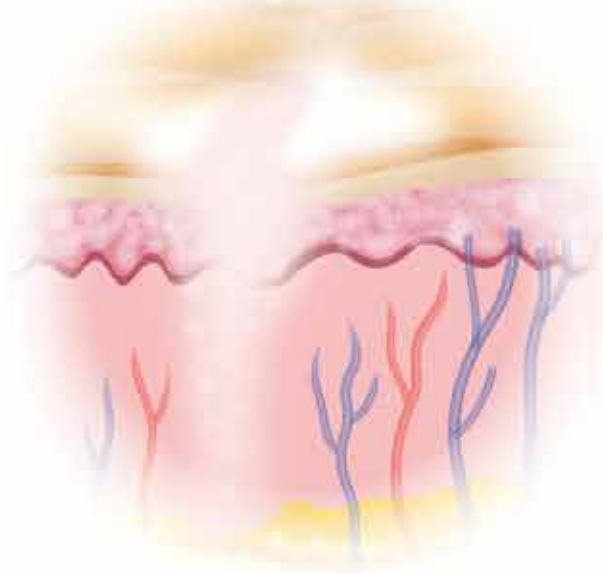

## De 11 F'er:

- ① Fjern årsagen til såret
- ② Fjern nekroser / urenheder
- ③ Fjern hæmmende faktorer
- ④ Fjern ødem
- ⑤ Fjern smerter
- ⑥ Fugtigt sårbehandling
- ⑦ Fornuftig bandage
- ⑧ Fred og ro
- ⑨ Forebyggelse
- ⑩ Follow up
- ⑪ **FOKUS** på omkringliggende hud

Produkttype	Indikation	Virkning	Absorptionsevne	Produktnavne	Vores sortiment
<b>Alginat</b>	Anvendes til; <ul style="list-style-type: none"> <li>Moderat til kraftigt væskende sår.</li> <li>Overfladiske sår.</li> <li>Sår med caviteter (trådet udgave).</li> </ul>	Absorberer sårsekret og omdannes til en gelmasse. Enkelte alginater har en hæmostatisk virkning. Kræver sekundær bandage.		Algisite M, Biatain Alginat, Kaltostat, Melgisorb, Suprasorb A, Tegaderm Alginat.	
<b>Fiberbandage</b>	Anvendes til; <ul style="list-style-type: none"> <li>Moderat til kraftigt væskende sår.</li> <li>Overfladiske sår.</li> <li>Sår med caviteter (trådet udgave).</li> </ul>	Absorberer og binder sårsekret og bakterier i bandagen. Omdannes til en gelmasse. Kræver sekundær bandage.		Aquacel/ -Extra, Durafiber, Exufiber, Subersorb Liquacel	
<b>Skumbandage</b>	Anvendes til; <ul style="list-style-type: none"> <li>Let til kraftigt væskende sår.</li> </ul> Velegnet til sår, hvor der ønskes længere skifteintervaller. Kantfikseres.	Absorberer, binder og håndterer sårsekret i bandagen. Sikrer fugtigt sår miljø. Findes uden og med klæbekant. Semipermeabel		Allelyn, Aquacel Foam, Biatain, Cutinova Hydro, Polymem, Suprasorb P, Tegaderm Foam	
<b>Skumbandage med silikone</b>	Anvendes til; <ul style="list-style-type: none"> <li>Let til moderat væskende sår.</li> </ul> Velegnet til sår, hvor der ønskes længere skifteintervaller.	Absorberer, binder og håndterer sårsekret i bandagen. Sikrer fugtigt sår miljø. Findes uden og med klæbekant.		Advazorb Border, Allelyn Gentle/ Border, Allelyn Life, Aquacel Foam, Askina DresSil/ Border, Biatain Silikone, Cutimed Siltec/ Border, Mepilex/ Border/ Border Flex	
<b>Skumbandage med silikone, tynd</b>	Anvendes til; <ul style="list-style-type: none"> <li>Let væskende sår.</li> </ul> Velegnet til sår, hvor der ønskes længere skifteintervaller.	Absorberer, binder og håndterer sårsekret i bandagen. Sikrer fugtigt sår miljø. Findes uden og med klæbekant.		Allelyn Gentle Lite/ Border Lite, Biatain Silicone Lite, Cutimed Siltec L, FoamLite Convatec, Mepilex Lite/ Border Lite	
<b>Super-absorbant</b>	Anvendes til; <ul style="list-style-type: none"> <li>Moderat til kraftigt væskende sår.</li> </ul>	Absorberer og binder sårsekret og bakterier i bandagen. Minimerer risiko for maceration af sår omgivelser. Skal fikseres.		Biatain Super, Curea Clean/ Breath, Curea P1, Curea P2, Eclipse Adherent, Mextra, Vliwasorb, Vliwasorb Pro	
<b>Negativ trykbandage</b>	Anvendes til; <ul style="list-style-type: none"> <li>Sår der er stagneret.</li> <li>Sår med kraftig sekretion.</li> </ul>	Pumpe med superabsorberende bandage der absorberer og binder væske og bakterier i bandagen. Medvirker via den kraftige absorption til oprensning af såret.		Avelle, Pico	
<b>Hydrobalance</b>	Anvendes til; <ul style="list-style-type: none"> <li>Let til kraftigt væskende sår.</li> </ul>	"Intelligent" bandage, der selv kan finde ud af, om såret har brug for tilførsel eller fjernelse af fugt. Kræver sekundær bandage.		Suprasorb X	
<b>Salvekompres</b>	Anvendes til; <ul style="list-style-type: none"> <li>Let til kraftigt væskende sår.</li> </ul>	Sårkontaktlag der er imprægneret med fedtstof. Medvirker til det fugtige sår miljø. Kan kombineres med hydrogel, hvor der ønskes tilførsel af fugt. Kræver sekundær bandage.		Bactigras (Paraffin + klorhexidin) Jelonet (Paraffin) Lomatuell H (Vaseline) Physiotulle (Vaselin, CMC) Cuticerin (Paraffin)	
<b>Sårkontaktlag med silikone</b>	Anvendes til; <ul style="list-style-type: none"> <li>Let til kraftigt væskende sår.</li> </ul>	Belagt med medicinsk silikone; Sikrer skånsom fjernelse af sårkontaktlaget fra sår bunden. Kan kombineres med hydrogel, hvor der ønskes tilførsel af fugt. Ideelt hvor såret skal have fred til at hele og hvor sekundær bandage kan skiftes ved behov.		Cuticell Contact, Mepitel One, Mepilex Transfer, Silflex	
<b>Hydrokolloid</b>	Anvendes til; <ul style="list-style-type: none"> <li>Sår i ophejnings- eller modningsfasen.</li> </ul> Anbefales ikke til; <ul style="list-style-type: none"> <li>diabetiske fodsår, arterielt betingede sår og klinisk inficerede sår</li> </ul>	Sikrer fugtigt sår miljø. Er en semiokklusiv eller okklusiv bandage. Øger effekten af steroider ved behandling af dermatologiske lidelser. Findes også i tynd udgave samt med borderkant.		Comfeel Plus, DuoDERM, Suprasorb H, Sureskin II, Tegaderm Hydrokolloid	
<b>Hydrogel</b>	Anvendes til; <ul style="list-style-type: none"> <li>Sår hvor fugt ønskes tilført.</li> <li>Sår hvor fibrin og nekrose ønskes opløst.</li> <li>Anvendelig til smertefulde sår.</li> </ul>	Gel består hovedsageligt af vand. Obs beskyttelse af sårkanter. Findes med og uden alginat. Kræver sekundær bandage. Gelplade, indeholder polymer, der kan absorbere væske og de findes med og uden klæbekant.		Aquaform, DuoDERM Hydrogel, Intrasite, Purilon, Suprasorb G, Tegaderm Hydrogel.  Som gelplade: ApoCure, Suprasorb G.	
<b>Hydrofob bandage</b>	Anvendes til; <ul style="list-style-type: none"> <li>Koloniserende/ inciserende sår.</li> <li>Let til kraftigt væskende sår.</li> <li>Anbefales til svampe infektioner på hud og i hudfolder.</li> </ul>	Kontaktlag er imprægneret med fedtsyreester, der gør forbindingen hydrofob. Disse binder bakterier til bandagen og virker derved oprensende. Enkelte kræver sekundær bandage. Findes som gaze, skum, gel eller filmbandage		Sorbact absorberende bandage/Foam/Gelkompres/ Kirurgisk bandage/ Kompres/ Meche/ Superabsorbant.	
<b>Honning-bandage</b>	Anvendes til; <ul style="list-style-type: none"> <li>Sår i oprensningsfasen.</li> <li>Sår med infektion eller mistanke om infektion.</li> </ul>	Honning har en antibakteriel virkning og en osmotisk effekt, mindsker lugtgener og medvirker til fugtig sårheling.		Activon Tube/ Tulle, Algivon Plus, Actilite. Revamil Hydrofil Sårigel/ salve-balm/ netforbinding.	
<b>Bandage med PHMB</b>	Anvendes til; <ul style="list-style-type: none"> <li>Sår i oprensningsfasen.</li> <li>Sår med infektion eller mistanke om infektion.</li> </ul>	PHMB indeholder polyhexanid, der medvirker til oprensning af sår. Virker antimikrobielt og er specielt velegnet til sår med mistanke om bio-film. Findes som skyllevæske, gel, hydrobalance- og skumbandage.		Prontosan gel, Prontosan X Prontosan skyllevæske Suprasorb X+PHMB.	
<b>Oprensende bandage</b>	Anvendes til; <ul style="list-style-type: none"> <li>Svært helende sår i oprensningsfasen.</li> <li>Hvor der ønskes en infektions-profylaktisk behandling af såret.</li> </ul>	Mesait virker oprensende via saltets rensende effekt. Iodosorb er bactericid og har en høj absorptionskapasitet, hvilket bidrager til debrideringen. Suprasorb X + PHMB (bandage) der både kan absorbere og afgive fugt til såret.		Iodosorb, Mesait, Suprasorb X + PHMB.	
<b>Solvbandage</b>	Anvendes til; <ul style="list-style-type: none"> <li>Sår med eller mistanke om infektion.</li> </ul>	Solvprodukter findes i mange udgaver. Fælles for dem alle er, at solv frigives ved kontakt med sårsekret og virker antimikrobielt. Solvbandager kan i kombination med antibiotika anvendes til behandling af infektioner.		Acticoat/ Absorbent/ Flex, Allelyn Ag/ Gentle, Aquacel Ag/ Extra/ Extra+/ Foam, Biatain Ag/ Silicone Ag/ Alginat Ag/ Durafiber Ag, Mepilex Ag/ Transfer Ag, PolyMem Silver, Physiotulle Ag, Tegaderm Alginate Ag, Melgisorb Ag, Suprasorb A + Ag	
<b>Kulbandage</b>	Anvendes til; <ul style="list-style-type: none"> <li>Sår med nekrose, infektiøse sår og cancersår (sår der lugter).</li> </ul>	Kul indkapsler og eliminerer lugtgener. Enkelte bandager er med solv, der virker antimikrobielt. Kræver sekundær bandage/fiksering.		CarboFlex, Carbonet, Vliwaktiv.  Incl. solv: Vliwaktiv Ag/ Absorbent.	
<b>Special-bandage</b>	Anvendes til; <ul style="list-style-type: none"> <li>Sår med forsinket sårheling.</li> <li>Smertefulde sår.</li> </ul>	Proteaseregulerende bandager anvendes til sår med forsinket sårheling, hvor der er mistanke om ubalance i såret (Proteaser).  Biatain Ibu indeholder Ibuprofen, der frigives i takt med absorption af sårsekret.		Suprasorb C.  Biatain Ibu.	
<b>Filmbandage</b>	Anvendes som; <ul style="list-style-type: none"> <li>Fiksering.</li> <li>Primær/ sekundær bandage.</li> </ul>	Er semipermeabel.  Filmprodukter findes i mange udgaver; rulle, plade, steril bandage med og uden sårpude, samt med silikoneklæb.		Curapor Transparent, Curi-Med/ -Film + pad, Fixomull Transparent, Leukomed T, Mepitel Film, Mepore Film på roll/ +pad, OpSite flexifix/ flexigril/ IV 3000/ Gentle, Suprasorb F, Tegaderm Film/ -Roll/ +Pad/ Absorbent	
<b>Absorberende forbindelse</b>	Anvendes som; <ul style="list-style-type: none"> <li>Primær eller sekundær bandage ved let til moderat væskende sår.</li> </ul>	Findes i forskellige udgaver med; <ul style="list-style-type: none"> <li>Forskellig væskehåndtering.</li> <li>Nogen med klæb og nogen uden klæb.</li> <li>Nogen sterile og nogen usterile.</li> </ul>		Curi-Med absorberende bandage, Mesorb, Multisorb, Melolin, Metalline, Solvaline OpSite post-op, Curapore Post-OP, Curi-Med Post-OP, Cutiplast Post-OP, Medipore+Pad, Mepore, Mepore Pro, Primapore.	
<b>Hud-beskyttelse</b>	Anvendes som; <ul style="list-style-type: none"> <li>Beskyttelse af intakt hud.</li> <li>Behandling af skadet hud.</li> </ul>	Til behandling og genopbygning af skadet hud Beskyttelse af udsat hud Hudpleje/ behandling Findes som barrierefilm, salver og cremer med plejende midler.		Abena Hudplejesalve, Abena Zinksalve, Abena Skincare Ointment, Abena Intensiv Care.  Cavilon, Comfeel hudbeskyttelse, Conveen Critic Barriere/ -Protact, SkinPrep, Welland Barrierefilm, Zinkpasta, Silesse No-String barriere	



# Abena sårplakat

